

Die tragbaren CBX-Kompaktwaagen eignen sich ideal für den Einsatz im Bereich (Aus-)bildung, Labor, Office oder Produktionskontrolle. Das helle LCD-Display zeigt 18 mm hohe Ziffern an. Es sind keine Batterien notwendig, da die CBX mit einem internen, wiederaufladbaren Akku (ca. 216 Betriebsstunden) ausgestattet ist. Das Aufladen des Akkus kann über ein beiliegendes Netzteil erfolgen oder über einen Niederspannungs-USB-Eingang. Die Edelstahl-Wägeplatte ist leicht zu reinigen und schützt das Gerät vor den meisten Materialien und Flüssigkeiten. Die Kalibrierung der CBX erfolgt einfach über die Tastatur, um jederzeit genaue und präzise Ergebnisse zu gewährleisten.



CBX Kompaktwaagen enthalten einen serienmäßigen Akku, um transportables Wiegen möglich zu machen.



Merkmale

- Robustes ABS-Gehäuse ermöglicht Einsatz im industriellen Umfeld
- Externe Kalibration ermöglicht Justage mit Kalibriergewichten
- Hell hintergrundbeleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Schnelles Aufstellen und einfache Bedienung sorgen für Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Große, leicht zu reinigende Edelstahl-Wägeplatte
- Libelle und höhenverstellbare Füße für bessere Wiegeergebnisse
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Batterieanzeige weist hin, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Der Betrieb mit Niederspannung, über die USB-Schnittstelle, erhöht die Flexibilität bei der Stromversorgung

Anwendungen


- Wiegen
- Stückzählung

About ADAM:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Produktdetails

Modell	CBX 1201	CBX 3001	CBX 6000
Kapazität	1200g	3000g	6000g
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g
Wiederholbarkeit	0.2g	1g	2g
Linearität	0.3g	1.5g	3g
Größe Wägeplatte	148x148mm		
Wägeeinheiten	g, N, lb, oz		
Kalibration	External		
Display	Hell hinterleuchtetes LCD mit 18mm-hohen Ziffern		
Stromversorgung	Interner Akku / 5VDC 1A Adapter		
Betriebstemperatur	0° to 40°C		
Gehäuse	ABS Kunststoff		
Gesamtabmessungen	155x225x60mm		
Nettogewicht	0.572kg		

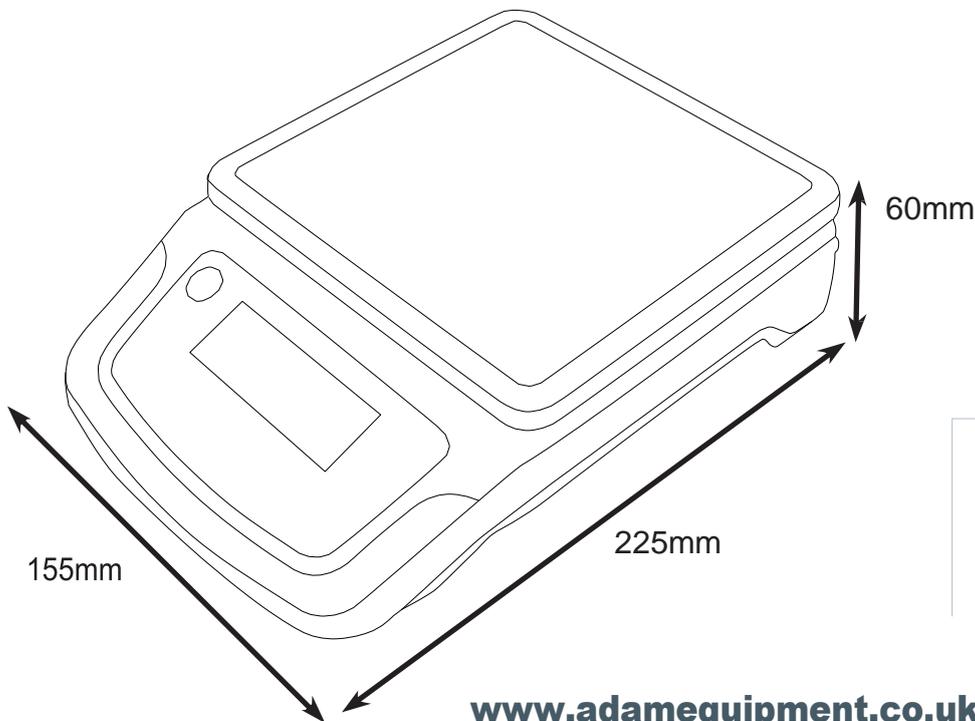

Bestellen:

www.adamequipment.co.uk

Adam Equipment follows a policy of continuous improvement and reserves the right to change specification and pricing without notice. Adam Equipment's standard terms and conditions of sale apply. Errors and omissions excepted.